

ASSTIKE™

非接触温度計



- ※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
- ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
- ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

安全上のご注意

注意


- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本製品は室内専用です。日光(日光の反射光)が当たる場所ではセンサーの感度が著しく低下するため、ご使用できません。日差しが当たらない奥まった場所にてご使用ください。
- 温度の安定性と精度を確保するには、使用環境・場所が次の要件を満たす必要があります。
 - 1.空気の対流が比較的遅く、穏やかで温度が比較的安定している屋内エリアで使用してください。
 - 2.直接風が吹いている吹き出し口エリアでの使用は避けてください(屋内・屋外の境界エリア、エアコン、排気ファンの吹き出し口など)。
 - 3.湿気の多い場所などでは、使用しないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意


- ・本装置で測定されるのは、「体の表面温度（体表温）」であり一般的な体温計で測られる「体温」の値とは異なります。
- ・本製品は人体がウイルスに感染しているかどうか判別する機器ではありません。
- ・体表温は計測時や計測前の環境条件、被測定者の状態等により変動します。
- ・本装置によるディスプレイで発熱の疑いが出た場合は、体温計での再検温をお勧めします。
- ・発熱が確認された場合、別途医師による診察が必要です。
- ・本装置は、薬事認証を取得した医療機器ではありません。
- ・本装置を用いた診断などの医療行為にはご利用頂けません。
- ・特に真夏や真冬の外部環境下の影響を受けた被測定者がそのまま計測を行うと、実際の体温との誤差が大きくなる傾向があります。その際はしばらく測定環境下で待機し、再度の計測をお願い致します。
- ・本来の用途以外での使用により発生した損害等に関しては、弊社は一切の責任を負わないものとします。

各部の名称

正面

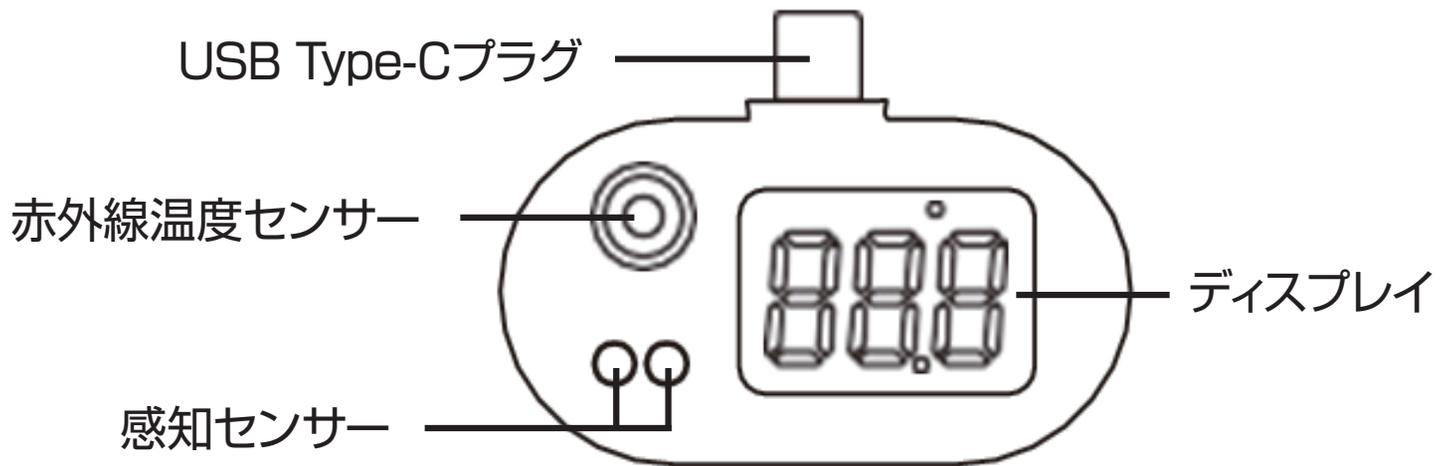

背面

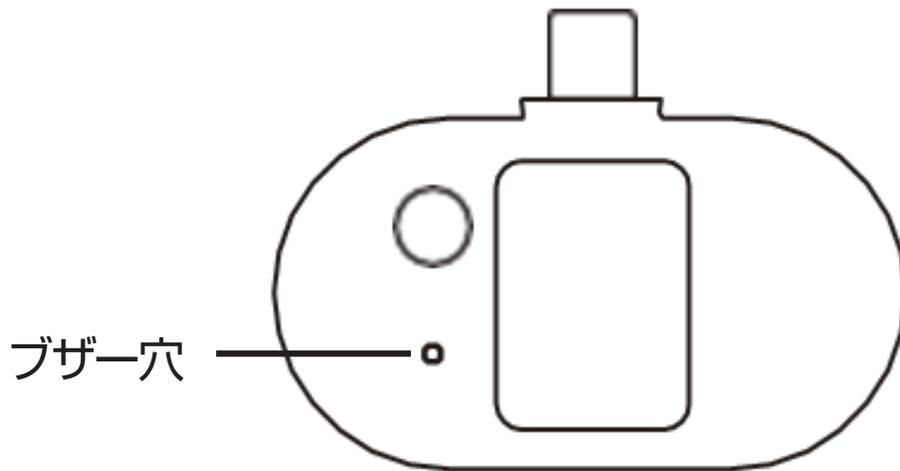

使用方法

1. 電源を入れる

- ① USB Type-Cプラグをお持ちのスマートフォンなどに接続します。

※スマートフォンにより画面オフ(スリープなど)の状態を解除する必要があります。

- ② 電源が供給されると、ディスプレイが全点灯後に「---」の表示となります。



2. 温度を測定する

- ① 測定したい部分を赤外線温度センサー及び感知センサーから約1-10cmの位置に近づけます。
- ② ブザーが鳴り、ディスプレイに温度が表示されます。(次ページ参照)
- ③ 約4秒経過後に表示が「---」へ戻ります。
- ④ 続けて測定する場合は、約4秒センサーから離れた後ディスプレイ表示が「---」となったことを確認してください。その後、「2.温度を測定する」から同様の手順となります。

使用方法

ブザーと温度は以下の通りです。

温度範囲によって、表示／ディスプレイ右上の色／ブザーが変わります。

温度範囲	表示	色	ブザー
35.8℃以下	Lo	緑	1回
35.8℃超過、37.4℃以下	測定温度	緑	1回
37.4℃超過、38.0℃以下	測定温度	黄色	2回
38.0℃超過、44.9℃以下	測定温度	赤	3回
45.0℃以上	Hi	赤	3回

3. 電源を切る

① USB Type-Cプラグを抜いてください。自動的に電源が切れます。

※背面にボタンがございますが、機能はございません。

お手入れ方法

お湯または水を固く絞った柔らかい布で拭いてください。

※本製品を水でぬらさないでください。

製品仕様

商品名	非接触温度計
型番	3R-NCT03
サイズ	約 48.99×36.15×13.50mm
重量	約 13g
入力電圧 / 電流	5V 0.02A
測定距離	約 1-10cm
測定時間	約 1.5 秒以内
使用環境温度	10-35℃

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から3カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033 FAX 092-260-8506



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

第1版 2021.03.15